


酸素ボンベ架台の取扱説明書

このたびは酸素ボンベ架台をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- 酸素ボンベ架台をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

同梱部品

- 酸素ボンベ架台
(1 個)
(φ100 mm以下用・φ130 mm以下用)

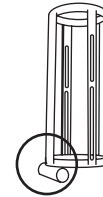

スタンダード車いす用 /
リクライニング車用



KA800 用

- 取付金具
(どちらか 1 個)



スタンダード車いす用



リクライニング車用

- ナイロンナット (2 個)
- ボルト (2 個)
- ワッシャー (4 個)



必要な工具

- スパナ (19 mm) (10 mm) 各 2 本

⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。
- 肘掛け跳ね上げ式の場合、跳ね上げができなくなります。
- リクライニング（時）車の場合、ボンベサイズにより背もたれ角度が制限される場合があります。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。



株式会社 **カフムラサイクル**


〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 丁目 9 番 1 TEL:078-969-2800

2010.08

ティッピングゴムの取外し方法

ティッピングゴムを抜き取ります。

※ティッピングゴムがある車種のみ

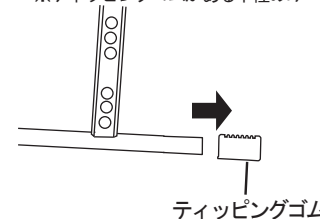

Point


ティッピングゴムが抜き取りにくい場合は
プラスチックハンマー等を使用して下さい。

取付方法



※スタンダード車いす用、リクライニング車用
KA800 専用の取付方法は同じです。

必ず駐車ブレーキを掛けた状態で作業をして下さい。


- ①下図の様に、酸素ボンベ架台の内側からボルトを通し、取付金具を固定します。
この時、ナイロンナットは仮止めしておきます。

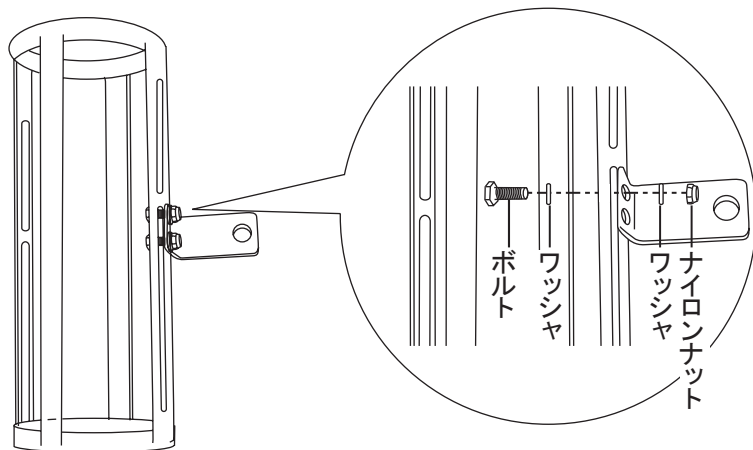


- ②車軸ナット, S ワッシャ, 平ワッシャを取外します。

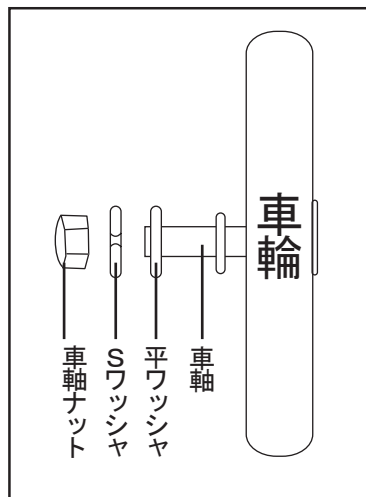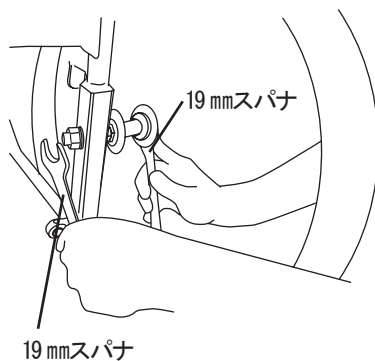

- ③ティッピングレバーに酸素ボンベ架台下のパイプを差し込みます。

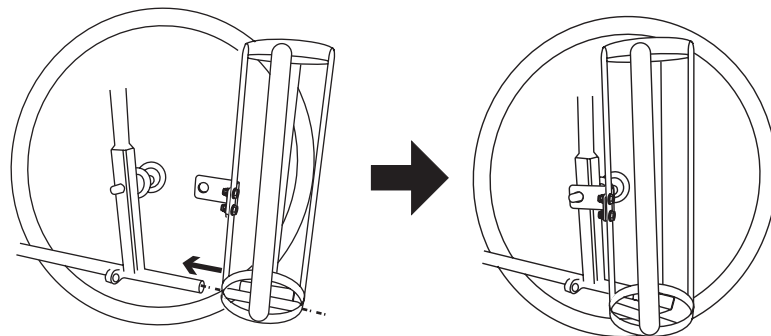

- ④車軸を取付ける穴に取付金具の穴（大）を合わせ“②”で取外したナット類を取付けます。
“①”で仮止めしておいたナイロンナットをスパナ（10 mm）で固定しながら、ボルトをスパナ（10 mm）で締め付けます。

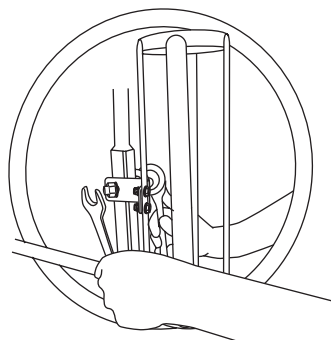

- ⑤取付完了です。
左右どちらにも取付可能です。

